



美的脱毛仪

使用说明书



扫一扫获取更多权益

使用时请仔细阅读本说明书，并妥善保管

- 脱毛仪内有高压，严禁私自拆卸。
- 使用时请不要遮挡通风口，通风口用于给脱毛仪散热降温。
- 仪器不能受潮或进水。
- 插头或电源线破损时禁止使用仪器。
- 禁止在易燃易爆环境中操作仪器。
- 日光浴及使用免晒型美黑产品者不建议立即使用。
- 纹身部位、深棕色和黑色斑点部位不要直接使用，这些部位可能吸收大量光能导致皮肤不适。
- 一次护理，同一区域闪光不要超过两次，否则可能会产生过多的热量易使皮肤不适。
- 如使用后皮肤红肿并持续24小时以上者暂停使用，请联系医生或者咨询客服。
- 使用中切勿将光头对准眼睛等脆弱部位，使用时佩戴护目镜；即使佩戴护目镜，也不可直视出光口发出的光或反射光。
- 在使用本产品前，请确认取下身上携带的所有金属物品，如戒指手镯等，以免引起设备故障。
- 保持房间内空气的流畅。
- 请在远离儿童的地方进行操作，使用过后放置在儿童接触不到的地方妥善保管。

以下情况禁止使用：



- 婴儿、孩童、高龄者；孕期、经期和哺乳期妇女。
- 局部或全身炎症者。
- 光敏性皮肤及正在使用光敏性药物的人群。
- 心脏起搏器等体内植入式医疗电子机器、人工心肺等维持生命装置的使用者，可能会引起电子医疗设备的错误操作。
- 耳朵、脖子、乳头、生殖器或肛门周围部位禁止使用，这些部位皮肤比较敏感，易受损伤。


特别注意：

黑色皮肤禁止使用，深色皮肤建议从低档开始测试使用，可根据自己肌肤的疼痛感适应能力调高到相应档位。

产品简介

部件展示

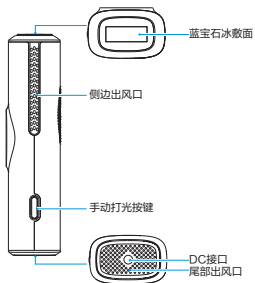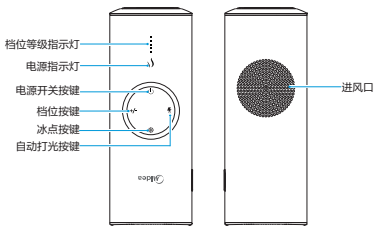

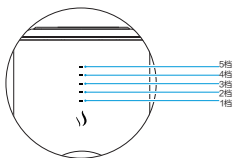

配件清单



刮毛刀x1



护目镜x1



电源适配器x1



芦荟凝胶x1



说明书x1



快速使用指南x1



信封盒x1

使用说明

产品按键功能介绍

· 手动打光按键

开机默认状态为手动打光，在出光口接触皮肤且电源指示灯亮起的情况下，轻按一下打光一次。

· 触摸按键

①档位等级按键（常亮），档位分为一档至五档共5个档位，分别由5个档位指示灯代表档位等级大小。轻触档位等级按键，档位由一档至五档从小到大递增，档位越高能量越大，脱毛见效越快，当档位调至最大值五档再切换时则档位依次递减，以此循环（开机有档位记忆功能，自动调至上一次关机时的档位）；

②电源开关按键（常亮），长触2秒开机，再长触2秒关机；

③自动打光按键（开机默认关闭，开启时亮起），轻触启动自动打光模式，出光口接触皮肤一次，自动打光一次；在自动打光模式下，手动打光按键失效；

④冰点按键，轻触冰点开启冰敷模式，冰敷模式分为两种：轻度冰敷—冰点按键指示灯亮白光；深度冰敷—冰点按键指示灯亮蓝光；轻触冰点按键可切换两种不同冰敷模式。

指示灯说明

档位指示灯：档位大小由LED指示灯标识，由5个LED灯组成，从低到高亮1-5个LED灯对应1-5档。

电源指示灯：仪器上电后，电源指示灯亮起，电源供电正常；仪器开机后，打光蓄能过程中，电源指示灯以0.4s/次闪烁；蓄能完成后电源指示灯熄灭，接触皮肤后电源指示灯亮起。

皮肤敏感性测试

如果您初次使用本产品，或在新的部位初次使用，请先在使用部位选一小片位置，按照如下要求进行皮肤敏感度测试：

- 1 参照后面“使用步骤”开机。
选择1档或2档。
- 2 按照上面的操作指导及使用注意事项对所选皮肤区域进行操作。
- 3 皮肤测试30分钟后，检测测试皮肤反应。
如果测试部位皮肤正常，则可继续使用；如果皮肤出现红肿，请于24小时后再测试。

使用步骤

- 1 为确保最佳脱毛效果，使用前需先使用刮毛刀去除脱毛区域的毛发，清洁并擦拭干净，以确保毛囊能够最大程度吸收能量。



- 2 戴上产品配备的专属护目眼镜，避免打光时刺激眼睛。



- 3 将适配器的尾部插头插入脱毛仪的电源接口。



- 4 将适配器与电源插座连接好，电源指示灯点亮。



- 5 长触电源键2秒开机，根据自身需要轻触冰点按键切换轻度冰敷与深度冰敷。轻度冰敷模式下，蓝宝石表面可达到 19° ，深度冰敷模式下，蓝宝石表面温度可达 15° 。

6 本机设有1-5档，第一次开机时默认1档（第二次默认上一次关机时的档位）。轻触档位按键调节档位，请从低档开始使用，如果感觉非常舒适，请逐步调高档位，根据自己肌肤的适应能力调节至相应的档位。

7 手动出光和自动出光设置

手动出光设置（适合小面积脱毛使用）

脱毛仪开机默认手动出光，按一次手动打光按键，出光一次。

自动出光设置（适用大面积脱毛使用）

脱毛仪开机后，轻触自动打光键，脱毛仪切换为自动出光，只需光头贴紧皮肤，脱毛仪会自动出光照射。
注意：脱毛仪处于该档位时，严禁不需要脱毛的部位触碰光头，同时提醒其他人切勿触。

切换手动出光设置

在自动出光状态，轻触自动打光键，脱毛仪切换为手动出光。

8 将光头贴紧需要脱毛的部位，尽量让机身与皮肤成直角：



①当脱毛仪处于手动出光模式时，待指示灯亮起，按下手动打光按键发出闪光，即完成覆盖区域的脱毛操作。光头移至下一个脱毛区域，并紧贴皮肤，待指示灯亮起，按下手动打光按键发出闪光，依次循环。每一部位建议循环打光2-3次。

②当脱毛仪处于自动出光模式时，不用按手动打光按键自动执行打光，即完成覆盖区域的脱毛操作。光头移至下一脱毛区域，并紧贴皮肤，脱毛仪自动打光完成脱毛，依次循环。每一部位建议循环打光2-3次。

- 9 操作完成后，长触电源开关键2秒关机。脱毛仪在开机状态下，5分钟无操作将自动关机。
- 10 拔下适配器插头，再从电源插座上取下适配器。
- 11 20分钟后，待光头表面冷却，用非酒精性湿巾或柔软的纸巾擦拭出光窗口。
- 12 清洁完毕，将脱毛仪、适配器放回包装盒。将设备放置在通风干燥，并且儿童无法接触到的地方。
- 13 护理受光部位肌肤：操作结束20分钟后，可选用保湿型洗护用品清洁脱毛区域并进行补水修护，若有不适，可冰敷30-60分钟直至不适感消失。

注意：

- 脱毛后，请在脱毛部位涂抹芦荟胶或类似保湿霜，请勿立即使用有刺激性的化妆品。
- 操作前，确保脱毛区域皮肤的清洁，建议使用冷水清洁皮肤。
- 操作2小时内脱毛区域皮肤不能碰水，48小时内，请勿进行日光浴、温水泡澡、蒸气浴等。
- 操作后2小时内，尽量避免脱毛区域皮肤暴露于强烈阳光下，在户外活动前应涂抹防晒霜，建议晚上操作最佳。
- 48小时内，请勿在消毒水处理过的游泳池游泳。

脱毛周期

第一个月	3-5天 使用一次	毛发或皮肤的外观不会有明显的变化，请耐心等待，结果绝对值得期待。
第二个月	一周 使用一次	毛发开始逐渐变细变软，洗澡时会发现有黑色毛囊脱落，惊喜开始体现。
第三个月	15天 使用一次	可以看到新生的毛发基本被抑制，不再反弹，可以轻轻拔出，只有少量毛发长出。
第四个月	30天 使用一次	毛发几乎不见，脱毛效果明显，拥有光亮完美肌肤。

说明：脱毛仪应按周期使用以达到脱毛效果，部分脱毛部位无需后续维护；部分脱毛部位需6个月、9个月、12个月不同时间的后续维护。

不良反应及处理

问题	可能的原因	处理方法
轻微灼烧感	光能量强度过高	将档位减小到舒适的程度，初次使用建议从1档开始。
脱毛后，脱毛的部位轻微变红	正常现象，对身体无害，且很快就会消退。	使用专配的修护芦荟凝胶涂抹不适部位，舒缓肌肤。
毛焦味	操作前未刮毛或刮毛不净，属毛发被碳化的正常现象。	使用本产品前，请先将待照射部位的毛发剔除。

简易故障排除表

现象	说明	处理方式
屏幕不显示	电源线未连接到位	连接电源线
无法开机	适配器未连接到位	连接适配器
手动打光不出光	1.光头未接触到皮肤 2.蓄电池没有完成，指示灯未亮起	1.与皮肤重新接触 2.待指示灯亮起再按键
自动关机	系统设定5分钟无操作，则自动关机	长触电源按键 2秒开机

服务指南

产品参数

产品型号：MB-HB0101

规格尺寸：167x63x41mm

光源：IPL光子

照射次数：无限次

能量档位：5档调节

额定功率：48W

额定电压：12V===

额定电流：4A

产品净重：310g

执行标准：GB4706.1-2005

环保清单

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr 6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑胶件	○	○	○	○	○	○
五金件	○	○	○	○	○	○
电路板控制件	○	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○
玻璃件	○	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。



本标识内数字表示产品在正常使用状态下的环保使用年限为10年。



美的商品三包凭证

用户信息

姓名：_____ 电话：_____

邮箱：_____ 邮编：_____

地址：_____

产品信息

产品名称：_____

产品型号：_____

销售商信息

签收日期：_____

购买渠道：_____

故障描述

请认真填写您的信息

在您准备进行产品维修时，需要将此三包凭证与产品一并寄回。

售后政策



7日无理由退货



30日换货、退货



365日以换代修

有关保修期内美的商品的保修，从签收日开始实施，您可按本条款享受退货、换货、维修的服务。

- 签收日起，7天内享受无理由退货；
- 签收日起，30天内发生质量问题，经本公司检测确认后，可以享受换货、退货；
- 签收日起，30-365天内发生质量问题，经本公司检测确认后，可以享受以换代修。

凡属于下列情况之一的，不属于保修范围：

- 未按产品说明书要求使用、维护、保管而造成的损坏；
- 因不正确操作、电源不正常、摔落等及其他意外而造成的损坏；
- 正常使用过程中造成的老化、磨损、变色等；
- 非经本公司认可的维修或改装而造成的损坏；
- 产品的附件及赠品；
- 使用非本产品标配配件造成的损坏；
- 因不可抗力因素（雷电、地震、火灾等自然灾害）造成的损坏；超出保修期（保修期为1年）。

不属于保修范围内的产品，本公司客户客服仍会热情为您服务。

当您需要进行产品维修或咨询时，请联络购买网店的客服或拨打全国服务热线400-8609-663。



www.midea.com

扫一扫获取更多权益

本使用说明书由美的集团或子公司出版，美的随时可能对本使用说明书中的印刷错误、不准确的最新信息进行必要的改进和更改，或对程序和/或设备进行改进，恕不另行通知。但是，此类更改将纳入到本指南的新版本中。

所有图片仅供功能说明参考，请以实物为准。



合格证
已检验

MB-HB0101

TEL 400-8609-663

广东美西科技有限公司
www.midea.com