


PANTONE1375C

28g双铜纸+专色1375C

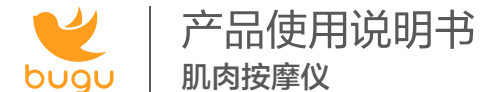

产品使用说明书

肌肉按摩仪

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

产品合格证	
检查结论:	合格
检查员号:	检验员A1
检查日期:	见生产批号

美的智慧家居科技有限公司

生产日期见生产批号前6位(年/月/日)

制造商: 美的智慧家居科技有限公司

地址: 佛山市顺德区北涌镇北涌居委会蓬菜路工业大道美的全球创新中心四栋二楼C区东北面


邮编: 528311
电话: 400-930-9983
网址: www.midea.cn
版本: V1.0

本资料上所有内容均经过认真核对, 如有任何印刷错漏或内容上的误解, 可向本公司咨询。
注: 产品若有技术改进, 会编进新版手册中, 恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动, 以实物为准。

产品简介

产品外观各有差异, 下图仅供参考, 具体以包装箱内实物为准。

部件展示

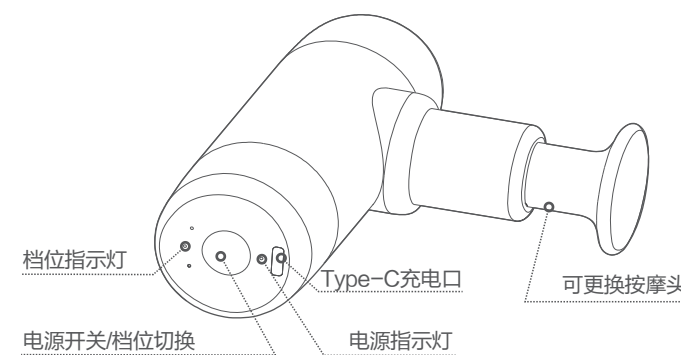


按摩头




使用说明

安装步骤


根据按摩需求选择按摩头插入按摩仪前方圆孔内。

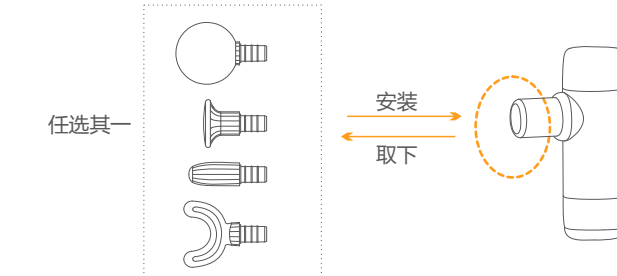

安装效果图

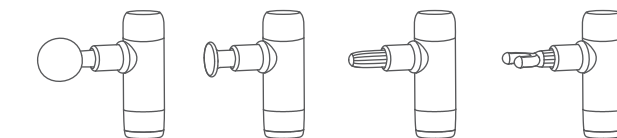


操作说明

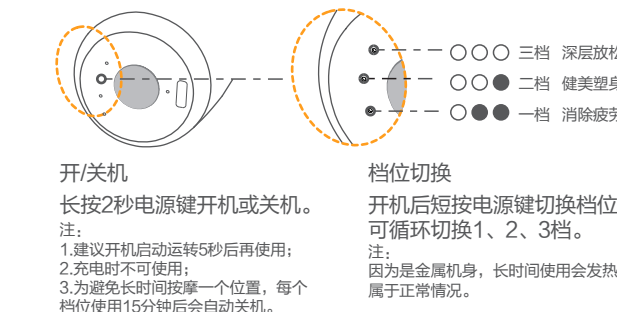

使用说明

充电

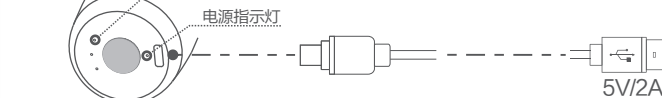

显示说明

档位指示灯	状态	描述
白灯	闪烁	电量11%~30%
红灯	闪烁	电量≤10%
红灯	常亮	关机充电中
白灯	常亮	关机充电完成

档位指示灯	状态	描述
白灯	●●●	一档
白灯	○○●	二档
白灯	○○○	三档

产品参数

产品名称: 肌肉按摩仪
产品型号: BG-QSQ2
供电方式: 可充电锂电池
电池容量: 2200mAh
电源输入: 5V/2A
电源接口: USB Type-C
强度调节: 3档
产品尺寸: 84*141*45mm
产品净重: 480g
包装清单: 按摩仪、按摩头*4、充电线、说明书

安全警示

为减少故障、触电、受伤、死亡及设备损坏的危险, 在使用本产品之前, 请认真阅读本手册。

- 禁止在非干燥、非洁净皮肤表面上使用, 可以隔着衣服使用, 轻轻在皮肤上按压、移动;
- 禁止在颈部以上和肌肉覆盖较少的部位使用, 禁止在骨头上使用, 在不产生疼痛或不适的情况下, 只在身体的软组织上使用本产品;
- 禁止在产生淤青、出现不适的部位使用;
- 禁止将任何物体放置在产品的发热处;
- 禁止将产品浸入水中, 也不要让水进入产品;
- 禁止将产品投入火中或靠近火源;
- 禁止故意摔落产品;
- 禁止以任何方式拆卸本产品;
- 禁止手指、头发或身体其他部位塞入按摩头安装孔, 有可能会被夹住;
- 青少年(12-18岁)需在家长的陪同下使用, 禁止独自使用, 禁止12岁以下儿童使用;
- 肌肉损伤如需使用本产品, 请先咨询医生或在专业人士陪同下使用。

注意事项

未获得医生同意, 请在以下任意情况下谨慎使用本产品。

怀孕、糖尿病并发症(如神经病变或视网膜损伤)、佩戴起搏器、癫痫或偏头疼、椎间盘突出、脊椎前移、椎骨脱落或椎椎关节强硬、近期做过手术等任何与您身体健康相关的问题, 这些并不意味着无法使用本产品, 建议使用前咨询医生。

实践证明, 在许多情况下, 将捶打训练结合到治疗方案中也是一种治疗方式, 但必须在医生、专家或理疗师的建议或陪同下进行。

环保清单

为了保护环境, 本产品或其中的部件报废后, 作为消费者的您, 有责任将其与生活垃圾分开, 送至有资质的回收站点, 由回收站按照国家相关规定进行分类拆解、回收再利用等处理。

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
外壳	○	○	○	○	○	○
硅胶件	○	○	○	○	○	○
传动组件	○	○	○	○	○	○
电机	○	○	○	○	○	○
电池	○	○	○	○	○	○
PCB组件	X	○	○	○	○	○
包装件	○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

注: 以上表中未列明的, 本产品中含有的其他部件及其均质材料均不含有害物质, 以上表中含有害物质的所有部件及其均质材料, 均符合中国 RoHS 对有害物质限制使用的严格要求, 请放心使用。

保修卡

相关信息(用户填写)

用户姓名	常用电话
通讯地址	
产品型号	产品编号
购买店铺	购买日期
发票号码	

维修记录

维修日期	
故障内容	
处理详情	
维修单位名称	
维修员签名	
维修单位电话	

在购买本公司产品时, 请立即填写此保修卡; 请妥善保管保修卡, 消费者不必将其寄回本公司; 维修时请携带保修卡及有效发票正本。

服务承诺

产品如有故障, 请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。本产品实行整机一年保修期。保修期起始日期以产品发货日期为准。

凡属下列情况之一的, 不属保修范围。

- 用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏, 或人为损坏;
- 经非本公司指定维修部维修, 或用户自行拆卸、维修;
- 产品附件(如按摩头等)、印刷品(如说明书等)和赠品等损坏;
- 使用非我司产品标配的赠品和配件, 造成损坏;
- 发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改;
- 非家庭使用(如经营、商用、公司集体)的产品;
- 超出保修期;
- 无有效发票;
- 因不可抗力造成损坏;

维修电话: 400-930-9983

不属于保修范围的产品, 将提供收费维修服务, 本公司客户服务中心仍热情为您服务。