

编号

材质描述

①

哑粉纸105g

生产要求

正背表面过哑油；封二为空白页；册脊骑马钉装订

# 美的西式小电事业部产品包装图纸

图纸编号

XS210700000001-A

版本编号

A

物料名称

使用说明书

发布日期

制图

## 基本结构工艺要求

线型：边缘线

纹向：

公差: 0 mm — 10 mm	$\pm 0.25$
10 mm — 50 mm	$\pm 0.50$
50 mm — 200mm	$\pm 0.75$
200mm —	$\pm 1.00$

 $\pm 0.25$   
 $\pm 0.50$   
 $\pm 0.75$   
 $\pm 1.00$ 

## 基本印刷工艺要求

色彩：专色蓝+黑

PANTONE BLUE C

模切跑位 $\leq \pm 0.5\text{mm}$ 

## 其他特殊注意事项

要求通过RoHS环保认证



120.00

### 美的冲牙器


使用说明书



扫一扫获得更多权益











使用时请仔细阅读本说明书，并妥善保管

65.00

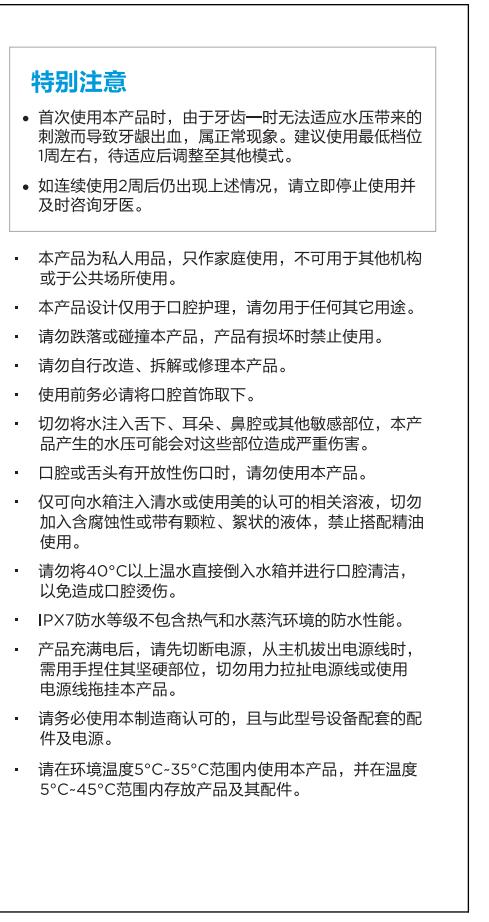

#### 特别注意

- 本公司含有不可拆卸的内置电池，请勿自行更换。
- 首次使用时本公司建议将产品置于常温或较冷的环境中，如浴室、微波炉、暖器、烤箱等，电池过热可能会引起爆炸。
- 加油站、油库、化学仓库附近等存储有易燃易爆油气或化学品的环境，严禁使用。
- 本产品为私人物品，只供家庭使用，不可用于其他机构或公共场所使用。
- 本公司设计仅适用于口腔护理，请勿用于任何其他用途。
- 请勿跌落或碰撞本产品，产品损坏时禁止使用。
- 请勿自行拆卸或修理本产品。
- 使用前务必关闭电源并取下插头。
- 切勿将水注入耳内或鼻孔内。
- 本产品产生的水流可能对这些部位造成严重伤害。
- 口腔或鼻腔头端开放伤口时，请勿使用本产品。
- 仅可使用清洁剂或带有颗粒的漱口水，禁止搭配精油使用。
- 请勿将40°C以上的温水直接倒入水箱并进行口腔清洁，以免造成口腔损伤。
- IPX7防水等级不包括热水和水蒸气环境的防水性能。
- 产品充电后，请勿切断电源。从机头拔出电源线时，需握住其硬连接，切勿用力拉扯电源线或使用电线绕线器固定产品。
- 请勿使用未经授权的配件，且与该型号设备兼容的配件及电源。
- 请在环境温度5°C~35°C范围内使用本产品，并在温度5°C~45°C范围内存放产品及其配件。

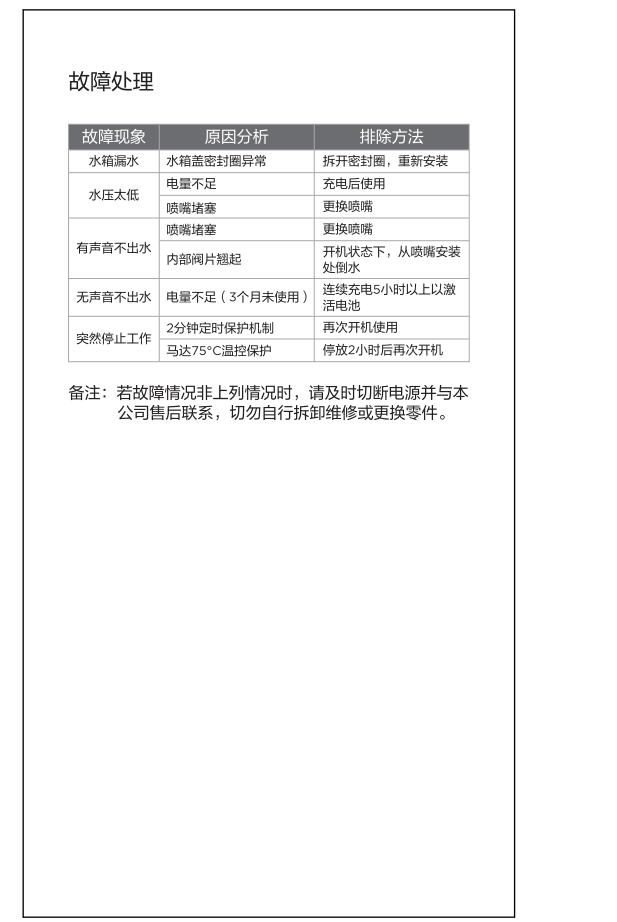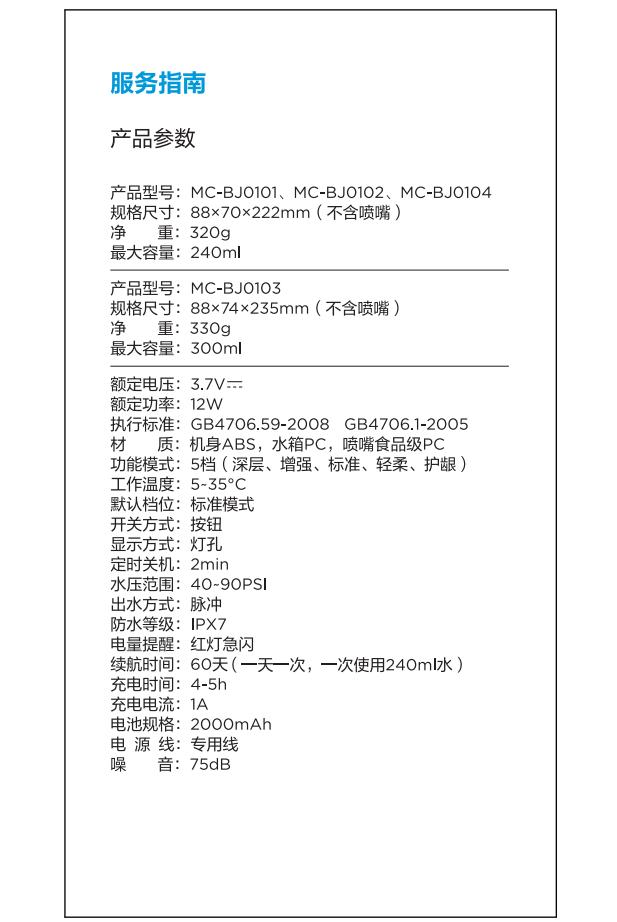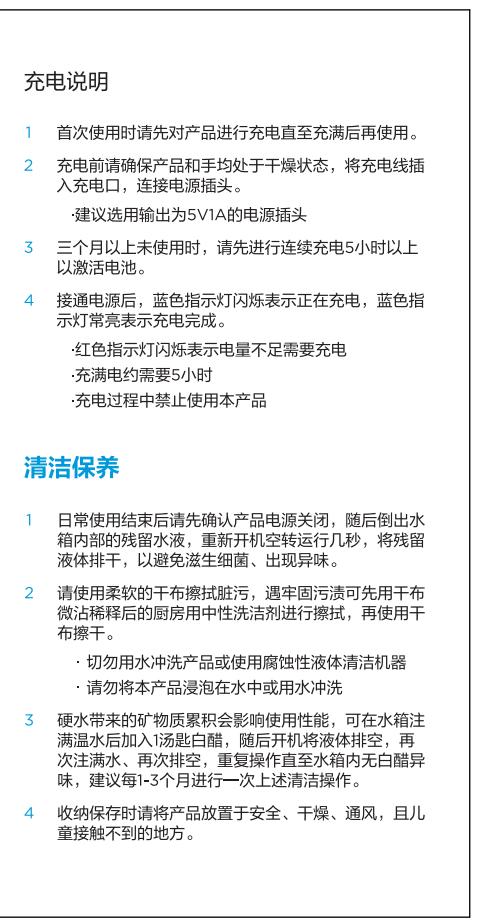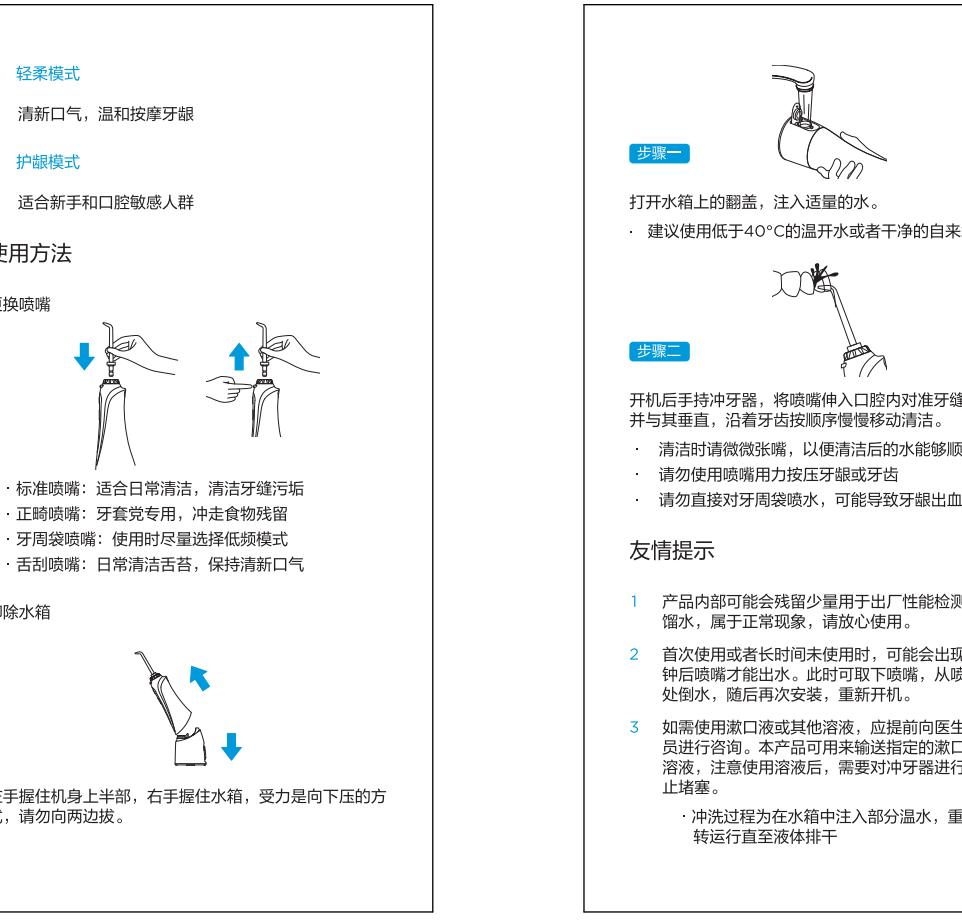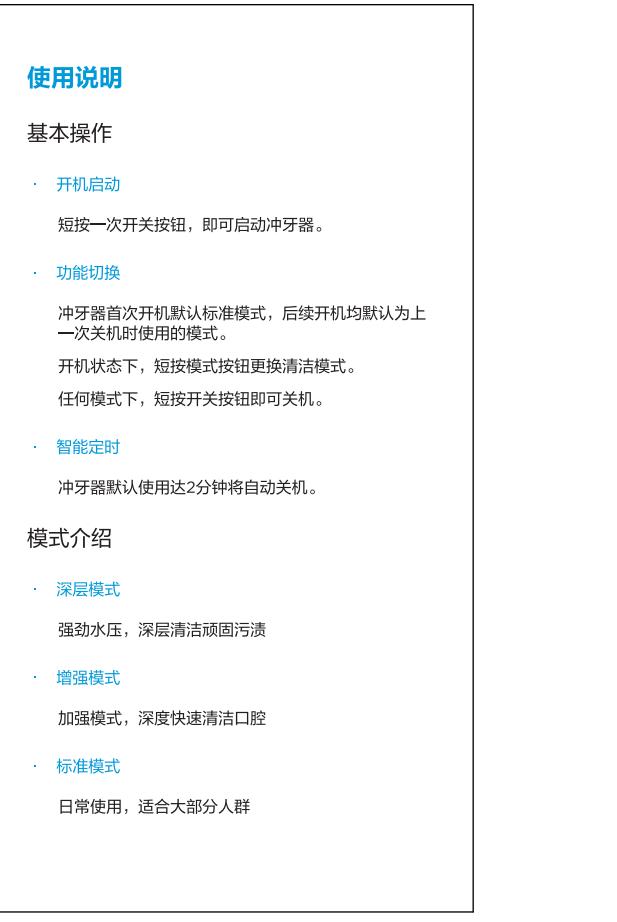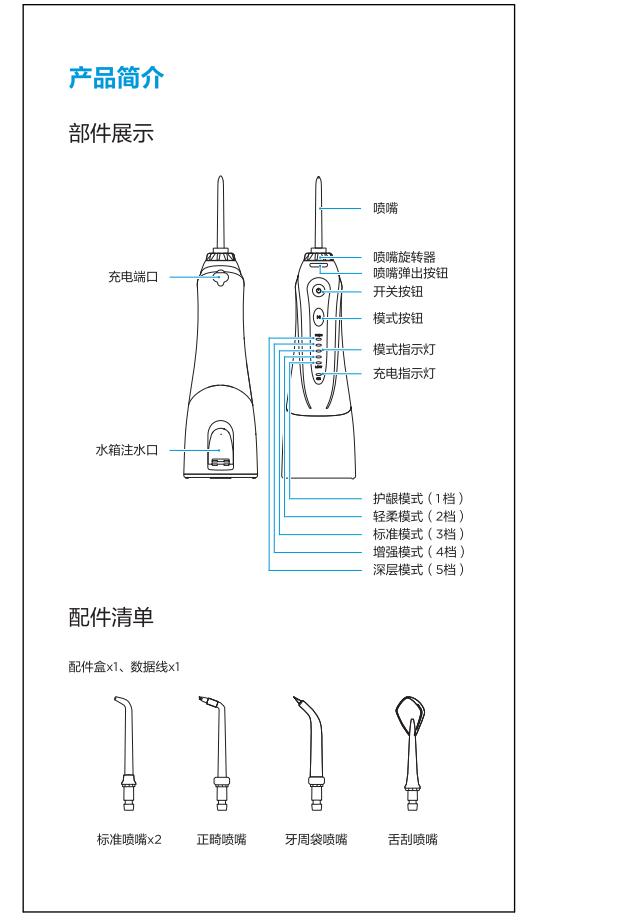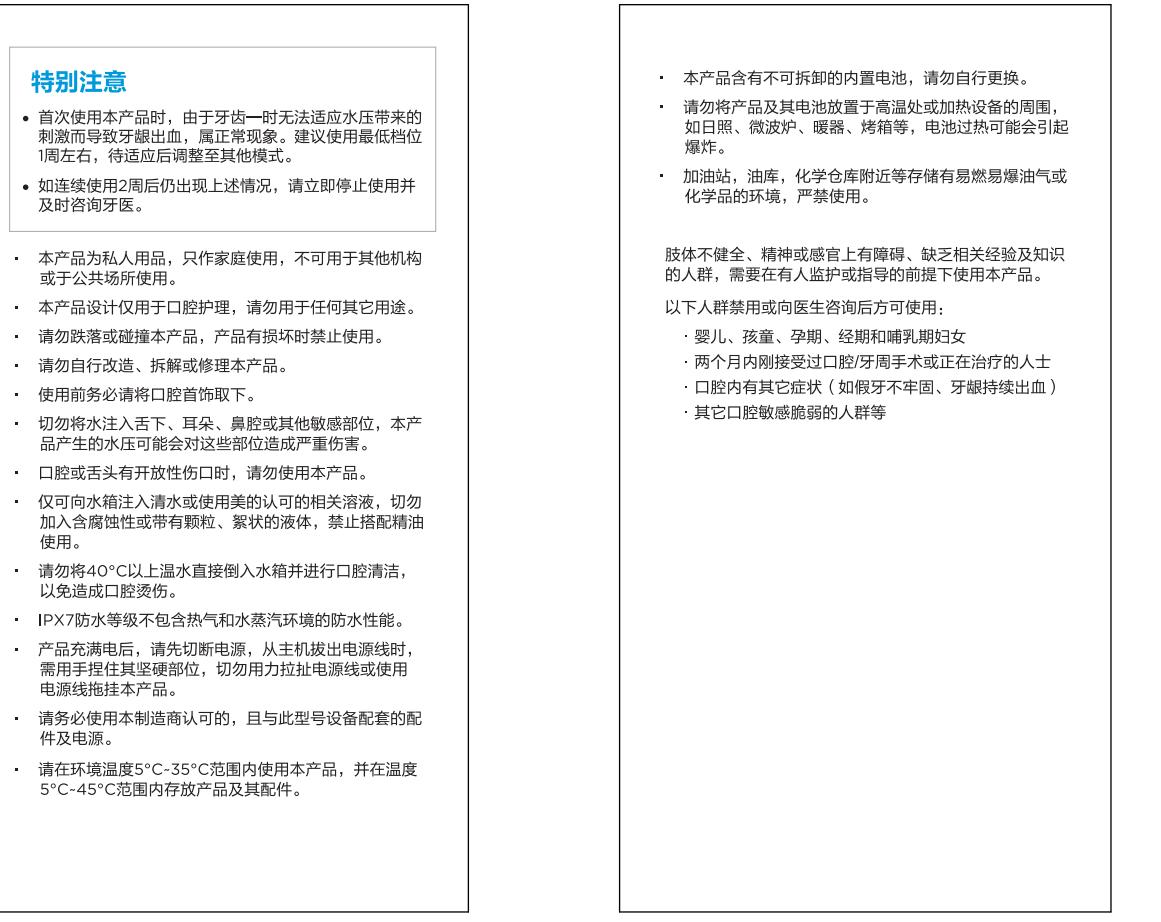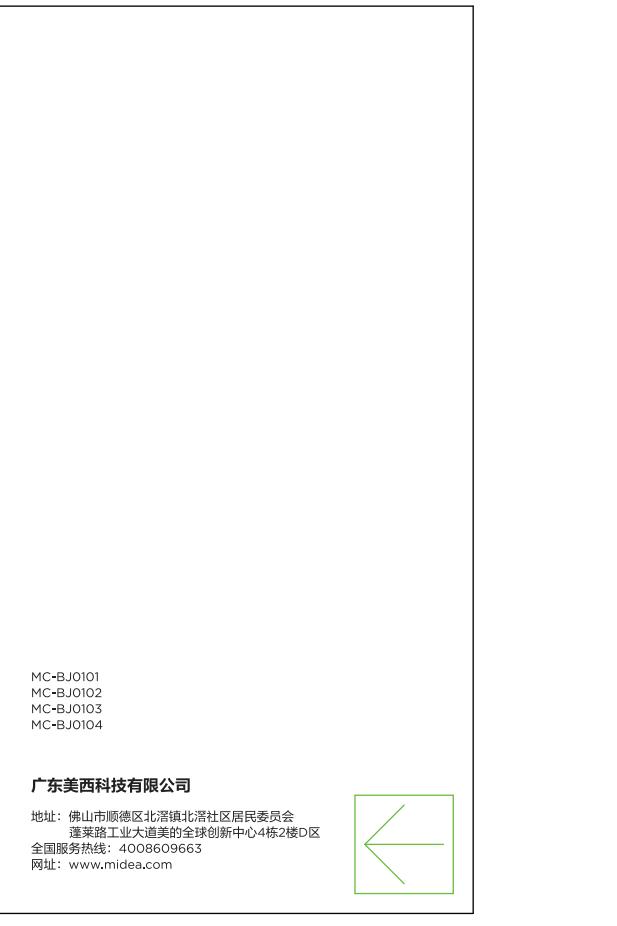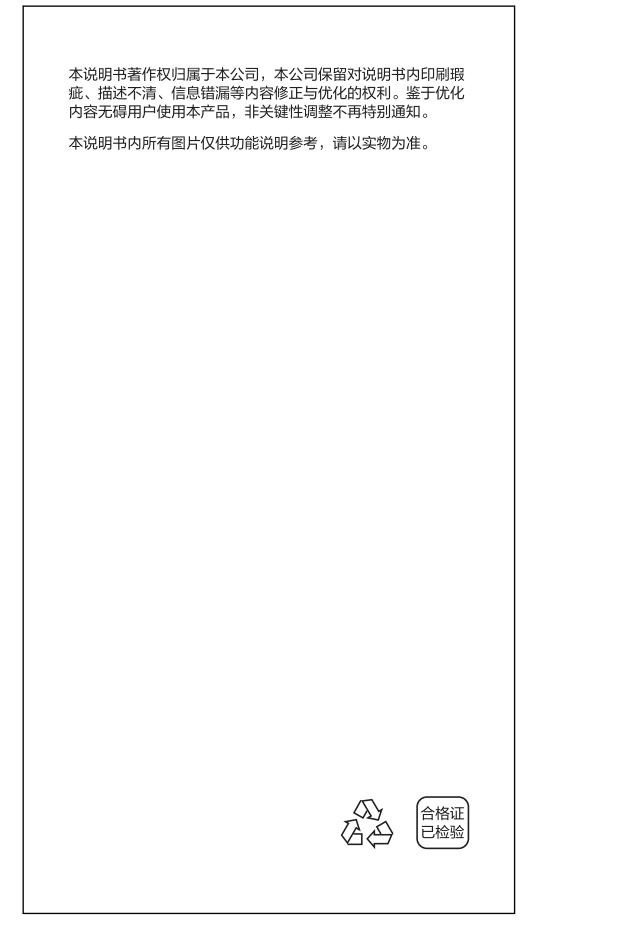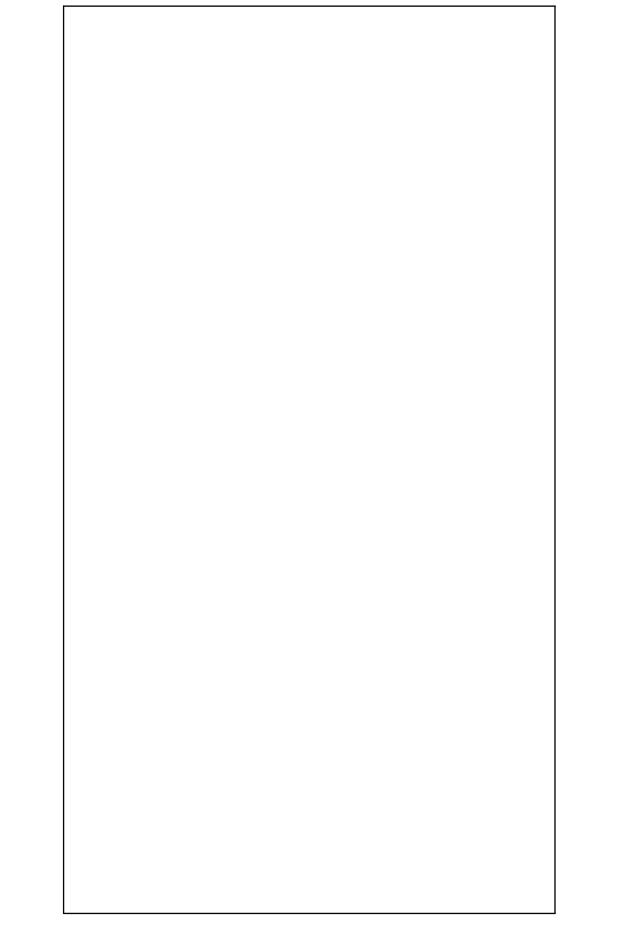

售后政策

7日无理由退换货

30日退货、退换

365日以旧换新

比例 1:1 单位 mm



1\*1mm齿刀线