

# 美的西式小电事业部产品包装图纸

图纸编号

Template

版本编号

A

物料名称

使用说明书

发布日期

制 图

基本结构工艺要求

左图为正面（印刷面）展开结构

要求：正面模切

线型：模切线

纹向：

公差： 0 mm — 10 mm ±0.25  
 10 mm — 50 mm ±0.50  
 50 mm — 200mm ±0.75  
 200mm — ±1.00

基本印刷工艺要求

色彩：单色黑+C:90 M:20 Y:0 K:0

公差：模切跑位 ≤ ±0.5mm

其他特殊注意事项

要求通过RoHS环保认证

比例 1:1 单位 mm

120.00

**Icerain**

**ESCOBILLA ELÉCTRICA PARA DIENTES**

Manual de Instrucciones

Y5SPro

Por favor, lea este manual cuidadosamente cuando lo use y guardarlo adecuadamente.

65.00

Este manual de instrucciones es publicado por Yourbox o sus compañías subsidiarias, y Yourbox puede realizar las mejoras y cambios necesarios a la información más reciente de errores tipográficos e imprecisiones en este manual de instrucciones, o mejorar los procedimientos y/o equipos en cualquier momento sin previo aviso. Sin embargo, tales cambios serán incorporados a la nueva versión de esta guía.

Todas las imágenes son solo de referencia; por favor, consulte los artículos reales.



Este producto es para uso personal, solo para uso en la familia, y no puede ser usado en otras instituciones o lugares públicos.

Este producto está diseñado solo para el cuidado de la boca, no lo use para ningún otro propósito.

No dejar caer o golpear este producto, y no use si está dañado.

No modifique, desarme o repare este producto por su cuenta.

Antes de usar, por favor quite las joyas que tiene en la boca.

No use este producto si tiene una herida abierta en la boca o sangrando.

Personas que han recibido recientemente cirugía oral/perioral o que están actualmente bajo tratamiento en los últimos dos meses.

Existen otros síntomas en la boca (como prótesis dentales inestables y sangrado persistente en las encías).

Otras personas con una cavidad oral sensible y frágil, etc.

Personas con reguladores cardiacos u otros dispositivos instalados en su cuerpo, etc.

Notas:

Al usar este producto por primera vez, algunas personas pueden tener enrojecimiento o picazón o incluso sangrado, lo cual es normal. Debido a que los dientes no pueden adaptarse a la limpieza irritante causada por la alta vibración de las cerdas. Se recomienda usar el modo suave por aproximadamente una semana, y luego ajustar a otros modos después de acostumbrarse.

Si la situación anterior persiste después de dos semanas de uso continuo, por favor deje de usar este producto y consulte a su dentista de inmediato.

(No se recomienda cargarlo en el baño! No colocar el cargador sobre o cerca de la fuente de agua, como la bañera, el lavabo y la piscina.

No girar la cabeza del cepillo de dientes para evitar dañar el motor del cepillo.

01

Las personas con extremidades incoordinadas, trastornos mentales o sensoriales, y falta de experiencia y conocimientos pertinentes deben utilizar este producto bajo la supervisión o orientación de personas plenamente capacitadas y conocedoras.

Las siguientes personas tienen prohibido el uso de este producto o solo pueden utilizarlo si han consultado con un médico:

- Bebés y niños
- Mujeres embarazadas, en periodo fisiológico y lactantes
- Personas que han recibido recientemente cirugía oral/perioral o que están actualmente bajo tratamiento en los últimos dos meses
- Existen otros síntomas en la boca (como prótesis dentales inestables y sangrado persistente en las encías)
- Otras personas con una cavidad oral sensible y frágil, etc.
- Personas con reguladores cardiacos u otros dispositivos instalados en su cuerpo, etc.

Notas:

Al usar este producto por primera vez, algunas personas pueden tener enrojecimiento o picazón o incluso sangrado, lo cual es normal. Debido a que los dientes no pueden adaptarse a la limpieza irritante causada por la alta vibración de las cerdas. Se recomienda usar el modo suave por aproximadamente una semana, y luego ajustar a otros modos después de acostumbrarse.

Si la situación anterior persiste después de dos semanas de uso continuo, por favor deje de usar este producto y consulte a su dentista de inmediato.


(No se recomienda cargarlo en el baño! No colocar el cargador sobre o cerca de la fuente de agua, como la bañera, el lavabo y la piscina.

No girar la cabeza del cepillo de dientes para evitar dañar el motor del cepillo.

02

**INTRODUCCIÓN DEL PRODUCTO**

Visualización de componentes

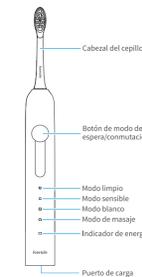

Lista de paquete  
 Cabecíl del cepillo x2, Cable de carga Tipo-C, Manual de instrucciones, Caja de viaje

03

**CÓMO USAR**

Operación básica

**Encender/Apagar**

Presione el botón de modo de espera/comutación una vez para encender el cepillo de dientes eléctrico. Mantenga presionado el botón de modo de espera/comutación por 5 segundos para apagar el cepillo de dientes eléctrico. Después de 5 segundos de encendido, presione brevemente el botón de modo de espera/comutación para apagar el cepillo de dientes eléctrico.

**Cambio de funciones**

Cuando se enciende el cepillo de dientes eléctrico por primera vez, el modo de limpieza se selecciona automáticamente. Dentro de los 5 segundos de encendido del cepillo de dientes eléctrico, presione brevemente el botón de modo de espera/comutación para cambiar de modo.

**Memoria inteligente**

Cuando no se enciende el cepillo de dientes eléctrico por primera vez, automáticamente cambia a el modo que usó la última vez.

04

**CÓMO USAR**

Operación básica

**Configuración inteligente de tiempo**

Después de encenderlo, registrará inteligentemente la duración efectiva de la cepillado y pausará cada 30 segundos para recordarle cambiar de área de cepillado, recordatorio fuerte durante un total de dos minutos sin apagarse, apagado automático después de tres minutos, para apagar el cepillo de dientes eléctrico.

**Configuración anti-salpicaduras**

El cepillo de dientes eléctrico vibra débilmente cuando la cabeza del cepillo no está presionada después de encenderlo, lo que puede reducir efectivamente el lanzamiento accidental de pasta de dientes o manchas de agua. Cuando la cabeza del cepillo está en contacto efectivo con los dientes, el cepillo de dientes vibra normalmente.

**Protección contra sobrecalentamiento**

Cuando la presión del cepillo de dientes es demasiado alta, la luz indicadora de energía parpadeará en rojo, y el cepillo de dientes se indica para reducir la vibración y la frecuencia.

05

**INTRODUCCIÓN DEL MODO**

**Modo limpio**

Es adecuado para una limpieza diaria eficiente, que puede impulsar eficazmente el flujo de líquido en la cavidad oral y la fricción entre las cerdas y las superficies de los dientes, eliminando eficazmente residuos de alimentos, placa dental, etc.

**Modo sensible**

Adecuado para personas con sangrado de encías y hipersensibilidad de la dentina de las encías. Se recomienda utilizar este modo cuando se utiliza este producto por primera vez.

**Modo blanco**

Es adecuado para eliminar impurezas persistentes tales como manchas de cigarrillo, manchas de té y manchas de café en la cavidad oral, blanqueando los dientes, reduciendo la pigmentación y haciendo que los dientes sean más lisos y ordenados.

**Modo de masaje**

Logra el efecto de masajear las encías mediante el ajuste de la amplitud de la alambre de cepillado.

06

**PASOS DE USO**

**Paso 1**

Mantén las cerdas alineadas con el botón del mango del cepillo de dientes, e inserta la cabeza del cepillo en el eje de conexión de metal por encima del mango, hasta que quede un espacio de 0.2-0.8 mm.

**Paso 2**

Después de enjuagarse, aprieta una cantidad adecuada de pasta de dientes sobre la cabeza del cepillo.

**Paso 3**

Coloca la cabeza del cepillo en la boca con las cerdas formando un ángulo de 45 grados con la superficie del diente, luego enciende el cepillo de dientes.

07

**Paso 4**

Presiona suavemente las cerdas y muevelas hacia atrás y hacia adelante con movimientos ligeros y lentos, para que el cepillo pueda alcanzar los dientes. Cuidado de no aplicar demasiada fuerza al cepillarse, al contrario que al cepillarse manualmente.

**Paso 5**

Al limpiar el lado interior de los dientes frontales, coloca la cabeza del cepillo verticalmente y muévela verticalmente hacia atrás y hacia adelante sobre la superficie del diente.

**Paso 6**

Se recomienda dividir los dientes en cuatro áreas y cepillar cada área por 30 segundos. Este producto pausará cada 30 segundos para recordarle cambiar de área. Después de dos minutos de cepillado, habrá una fuerte vibración de aviso, y el cepillo de dientes se apagará automáticamente después de tres minutos.

08

**Paso 7**

Enjuagarse la boca después de cepillarse los dientes. Enjuague el cepillo de dientes y déjalo que se seque al aire libre.

**Instrucciones de carga**

- Utilice un adaptador de 5V. La para cargar el producto. No utilice un adaptador de carga rápida, ya que podría dañar el producto.
- Cargar el producto antes de utilizarlo por primera vez hasta que esté completamente cargado.
- Al cargarlo por primera vez, abra la cubierta inferior del cuerpo principal, conecte el puerto de carga con el cable de carga y confirme que el cable de carga está conectado firmemente a la fuente de alimentación.
- Si no ha usado el cepillo de dientes por más de 6 meses, cargue según las anteriores instrucciones de carga hasta que esté lleno.
- Si no ha cargado por mucho tiempo, la luz indicadora se encenderá después de 10 minutos al volver a cargarlo, lo cual es un fenómeno normal.
- Cuando el cuerpo principal está cargando, el cepillo de dientes no puede funcionar. La luz indicadora de la batería está parpadeando constantemente, indicando que está cargando. Cuando la luz indicadora de la batería está siempre encendida, indica que la carga es completa.
- Si la luz indicadora parpadea durante el uso, significa que la batería está baja y necesita ser recargada a tiempo.

09

- Llévela aproximadamente 4-5 horas para cargarlo completamente.
- Es normal que el cuerpo principal esté ligeramente caliente al cargarlo. Si se siente demasiado caliente, por favor corte la alimentación inmediatamente y contacte al fabricante para mantenimiento.
- Mantenga el entorno del puerto de carga seco al cargarlo.

**LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO**

**Cuidado y mantenimiento**

- Después de usarlo diariamente, por favor confirme que la fuente de alimentación del producto está apagada, luego enjuague el mango y la cabeza del cepillo y colóquelo en un lugar seco y ventilado.
- Almacene el producto en un lugar seguro, seco y ventilado fuera de la mano de niños.
- Se recomienda reemplazar la cabeza del cepillo cada tres meses.

10

**GUÍA DE SERVICIO**

Especificaciones

Modelo del Producto: Y5SPro  
 Tamaño: 28x25x5mm  
 Tensión Nominal: 3.7V  
 Potencia Nominal: 5W  
 Norma de Implementación: GB 39669-2020  
 Material del Cuerpo: ABS  
 Modos de Funcionamiento: Limpieza, Sensible, Blanco, Masaje  
 Modo de Visualización: Luz Blanca  
 Modo Predeterminado: Modo de Limpieza  
 Encendido/Apagado: Presionar Botón  
 Temperatura de Trabajo: (5-35)°C  
 Ajuste Inteligente de Tiempo: 3min  
 Grado de Impermeabilidad: IPX7  
 Recordatorio de Energía: Luz Parpadeante  
 Duración de la Batería: 220 días (Utilizar modo suave dos veces al día, 2min cada vez.)  
 Tiempo de Carga: 4.5h  
 Corriente de Carga: 500mA  
 Batería: 2000mAh  
 Cable de Fuente de Alimentación: Cable de Puerto Tipo-C

11

**TRATAMIENTO DE FALLAS**

Fenómeno	Análisis de la causa	Método de exclusión
La intensidad de la oscilación se debilita gradualmente durante la operación.	La separación entre la cabeza del cepillo y el mango es demasiado grande o demasiado pequeña.	Coloque suavemente la cabeza del cepillo sobre los dientes. Retire la cabeza del cepillo y vuelva a instalarla. La distancia entre la cabeza del cepillo y el cuerpo de la manija debe ser de 0.2-0.8 mm para asegurarse de que la cabeza del cepillo puede vibrar normalmente.
La cabeza del cepillo no puede ser insertada en la varilla del cepillo.	Hay algo atrapado entre la cabeza del cepillo y el mango del cepillo.	Saca la cabeza del cepillo y límpiala.
El tiempo de ejecución es demasiado corto.	Poca energía	Utilice el producto en ambientes con temperaturas que oscilen entre 5-35°C. Utilizar después de cargar.

12

Deténgase de funcionar de manera súbita.	Poca energía	Utilizar después de cargar.
El indicador de modo no se ilumina al cargar.	No ha sido usado por mucho tiempo.	Continúa cargando y espera unos 10 minutos para que vuelva a la normalidad.
La cabeza del cepillo no puede ser insertada en la varilla del cepillo.	Hay un cuerpo extraño en el enchufe de la cabeza del cepillo.	Utilice una herramienta para sacar objetos extraños del enchufe de la cabeza del cepillo.
	Hay objetos extraños pegajosos en la barra de cepillado.	Limpia la barra de cepillado.
	No es una cabeza de cepillo de dientes que no es compatible con el cepillo de dientes.	Por favor, sustitúyalo por la cabeza de cepillo.

13

No se puede encender/comutar el modo.	Estado de protección de carga	Desconecte la carga o espere a que la carga esté completa antes de desconectar el cable de alimentación para cargar.
	La energía es demasiado baja.	Conecte el cable de alimentación para cargar.

Notes: Si la situación de falla no está listada arriba, desconecte inmediatamente la fuente de alimentación y contacte nuestro equipo de postventa. No desarme, reparar o sustituir las piezas por usted mismo.

**Cómo retirar las baterías**

- Antes de extraer la batería, el aparato debe estar apagado.
- Cuando va a extraer la batería, primero use herramientas para levantar la carcasa de plástico en la parte inferior del fuselaje, luego sacar las piezas internas del cuerpo principal, extraer la batería de litio y colocarla en la posición de reciclaje designada.
- Desectar la máquina y colocarla en el lugar de recolección de basura adecuado.

14