



公差: 0 mm	— 10 mm	± 0.25
10 mm	— 50 mm	± 0.50
50 mm	— 200mm	± 0.75
200mm	—	± 1.00



本使用说明书由美的集团或子公司出版。美的集团可能对
本使用说明书中的印刷错误、不准确的信息进行必要的
改进和更改。或对程序/或设备进行改进。恕不另行
通知。但是,此类更改将纳入到本指南的最新版本中。
所有更改均可能影响保修。请予以关注。


安全注意事项

使用本产品前请仔细阅读安全注意事项。该安全注意事项
能帮助您安全正确地使用本产品。避免造成人身伤害事
故。

- 如不了解操作程序和安全说明,请勿使用产品,以免导
致不当导致伤害。
- 本产品为私人用品,只作家庭使用,不可用于其他机构
或于公共场所使用。
- 本产品设计仅用于口腔护理,请勿用于任何其他用途。
- 请勿拆解或维修本产品,产品有损坏时禁止使用。
- 请勿自行改造、拆解或维修本产品。
- 使用前请务必清洁口腔后取下。
- 口腔或舌头有开放性伤口时,请勿使用本产品。
- 禁止对孩童、耳、鼻、眼、喉或其他敏感部位进行
使用,本产品产生的高压水流可能会对这些部位造成严
重伤害。
- 本产品标准的防水等级不包含热气和蒸汽环境的防水
性能,请勿在洗澡、淋浴或温泉时使用本产品。
- 请务必使用本制造商认可的,且与此型号设备配套的配
件及电源。
- 请在环境温度(5-40)°C范围内使用、存放产品及其
配件。

- 请勿将40°C以上温热水直接倒入水箱并自行口腔清
洁,以免造成口腔不适。
- 本产品含有不可拆卸的内部锂电池,请勿自行更换。
- 请勿将产品及其电池放置于高温或加热设备的周围,
如日照、微波炉、烤箱、烤箱等,电池过热可能会引起
爆炸。
- 本产品具有锂电池,请勿将50°C以上的高温直接倒入水
箱进行冲洗和浸泡。
- 请勿将充电电池放入火中,暴露于阳光下,或者高温处
充电、使用、放置、避免电池液体泄漏、高温、过充或
使用。
- 加油站、油库、化学仓库附近等存储有易燃易爆油气或
化学品的环境,严禁使用。
- 定期检查和清洁充电口,以防止灰尘和污垢的积累会降
低充电效率,从而可能导致过热或充电异常等不良后果。
- 若长时间不使用本产品,请及时给充电线及适配器,否
则可能会导致由于绝缘性能下降而引起电气火灾。
- 产品只适用本总线的漱口配件,其他品牌的漱口水可能
会因为含有未知化学成分,对产品造成腐蚀,不建议使
用。
- 仅可向水箱注入清水或使用本制造商认可的相关液体,
禁止加入非本制造商认可的相关液体,例如含酸性、
含腐蚀性、带有颗粒物或凝胶状液体。

- 产品内部可能会残留少量用于出厂性能检测的纯净水,
属于正常现象,请放心使用。
- 首次使用或长时间未使用时,可能会出现开机空转
不出水,此时可取下喷嘴,向水箱内加入少量水,
再重新安装喷嘴和开机。
- 肢体不健全、精神或感官上有障碍、缺乏相关经验及知
识的人群,需要在具备充分使用知识及完全民事责任能力
的人士的监督或指导下使用本产品。
- 以下人群请勿使用本产品:孕妇、哺乳期妇女、
两个月内刚接受过口腔/牙周手术或正在治疗的人士
口腔内有其它状况(如刷牙不彻底、牙龈持续出血)
其口腔或敏感部位的人群等
身体内部装有心脏起搏器,或植入其他装置的人
群等
- 初次使用如出现牙龈刺痛、出血,属正常现象。
<产生牙龈出血的主要原因有三种>
初次使用,牙齿未习惯水压的冲击,建议使用最低
档位1-2档;适应后再调整至其他档位。
冲牙器操作不当,可能会导致牙龈炎,建议使用前查
看使用说明(第5页)。
牙龈不健康,如连续使用2周后,出血没有缓解,
建议立即停止使用并及时咨询牙医。

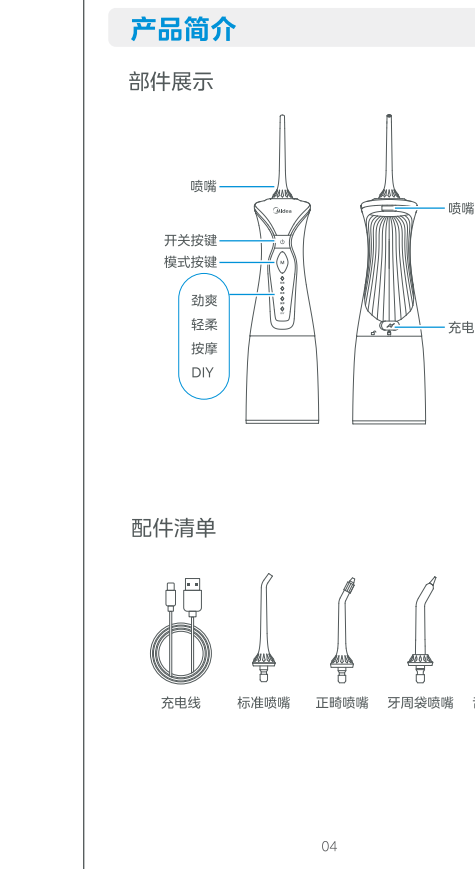

使用说明

基本操作

开机启动

- 首次使用需长按开机按钮激活冲牙器,当模式灯
亮起表示激活成功,再次短按开机按钮即可启动冲
牙器,后续使用也是短按开机按钮即可启动。
- 再短按一次开机按钮,即可关闭冲牙器。

功能切换

- 开机或关机状态下,短按一次模式按钮切换清洁模式。
- 冲牙器首次开机默认启动模式,后续开机默认以上
一次关机时使用的模式。
- 选择DIY模式,长按模式按钮,DIY模式灯由长变
短则表示进入DIY调节界面,闪烁状态下短按模式按钮可
调节力度,档位从1档至5档增强,短按开机按钮即可退出
DIY模式,进入关机状态。

智能定时

冲牙器连续运行2分钟后,将自动关机。

更换喷嘴

喷嘴安装
抓住喷嘴下部,按压入喷嘴插孔。

水箱注水

一只手握住主体,另一只手握住水箱,向左旋转水箱
并取出,然后向水箱内注满清水。

模式介绍

劲爽模式
强劲水压,深度清洁顽固污垢。

轻柔模式
适合新手及牙龈敏感人群。

按摩模式
脉冲水流,按摩牙龈。

DIY模式
1-8档水压调节,适合不同人群。



MC-BJ0102

TEL 400-8609-663

广东美的厨房电器有限公司
地址: 佛山市顺德区北滘镇北滘社区居委会委员会
国家工业设计院美的支持创新中心4楼2楼202
www.midea.com




清洁保养

清洁方法

日常使用后,请先确认电源关闭状态,随后倒
出水箱内部的残留液体,重新开机空转运行几秒,将残
留液体排干,避免滋生细菌,产生异味或故障。

充电说明

- 器具充电时必须使用输出为DC5V1A(实际输出最
大功率小于15W)的符合GB 4706.1-2005标准
要求的适配器给器具充电。暂不支持使用苹果手机
对器具进行充电。
- 首次使用时请先对产品进行充电,直至充满后再使用。
- 充电时,请确保充电口完全干燥,否则可能导致短路。
- 本产品充电状态下,请勿拆卸、拆解入口,垂
直放置,避免倾倒。
- 若3个月以上没有使用冲牙器,请根据上述充电要求进
行充电,直至充满。
- 关于电量指示:
模式灯闪烁表示电量不足,需要充电。
充电时,模式灯常亮;充满后,四个模式灯常亮。
完全充电需5-6小时。
充电状态下,冲牙器不可使用。

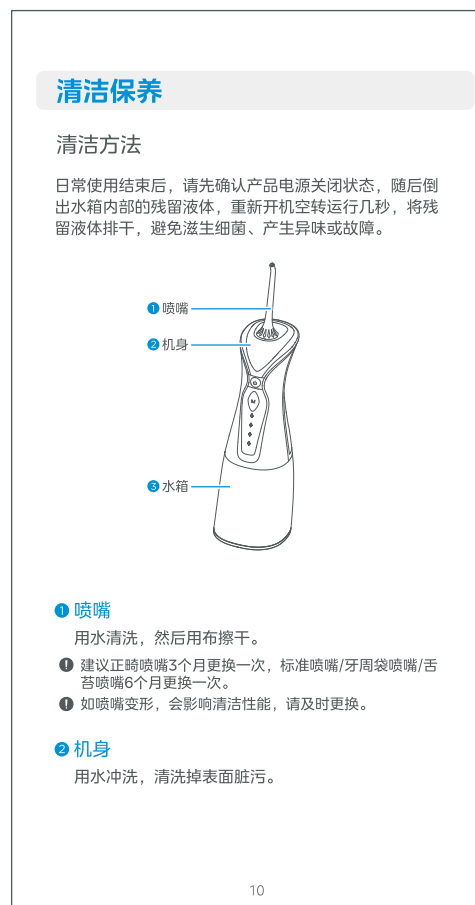

型号规格

产品型号: MC-BJ0102
工作电压: 3.7V
工作功率: 10W
执行标准: GB 4706.5-2008、GB 4706.1-2005
功能模式: 4档(劲爽模式、轻柔模式、按摩模式、
DIY模式)
工作温度: (5-40)°C
默认档位: 劲爽模式
定时关机: 2min
防水等级: IPX7
充电时间: 约6h
电池规格: 1500mAh
电 源 线: Type-C充电线

环保清单

产品中含有物质的名称及含量

名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多氯联苯 (PCB)	多溴联苯 (PBDE)
塑料外壳	0	0	0	0	0	0
五金零件	0	0	0	0	0	0
电机绕组	0	0	0	0	0	0
电路板	x	0	0	0	0	0
线材	x	0	0	0	0	0
电源线	0	0	0	0	0	0

本清单依据IEC 11354的规定编制。
注: 表示含有微量该物质,且含量均在
限值以下,不会对健康造成危害。
x: 表示含有微量该物质,且含量均在
限值以下,不会对健康造成危害。

在欧盟地区销售的正常条件下
本产品(除电池外)的使用寿命为10年。
电池在正常使用条件下,使用寿命为3年。
本产品生产过程中可能会产生少量的挥发性有机化合物,但含量极低,不会对健康造成危害。
本产品生产过程中可能会产生少量的挥发性有机化合物,但含量极低,不会对健康造成危害。
本产品生产过程中可能会产生少量的挥发性有机化合物,但含量极低,不会对健康造成危害。

电池取出方法

警告: 拆卸电池后,产品将报废。
下述操作仅供参考,日常使用维护请自
行拆卸。

- 请佩戴防静电、使用工具拆卸产品外壳。
- 将电池端子从控制板上拆下。
- 拆卸电池,并用绝缘材料包裹端子。
- 废弃电池请送至回收点,请勿随意丢弃。
法律与指南设置。

注意:
- 在拆卸前,必须将电池从产品中取出。
- 取出电池时,必须先拆掉防静电。
- 非专业人员请勿自行拆卸!

产品保修卡

用户信息
姓名: _____ 电话: _____
地址: _____ 邮编: _____
产品信息
产品名称: _____
产品型号: _____
销售商信息
名称: _____
地址: _____
电话: _____
日期: _____
购买渠道: _____

售后服务
7天无理由退货
365天保修

有关保修条款的详情,从售后日开始,您可通过本服务热线
或拨打400-8609-663,或前往美的售后服务中心。
注: 本产品保修期为自购买之日起,自购买之日起,自购买之日起。
注: 本产品保修期为自购买之日起,自购买之日起,自购买之日起。
注: 本产品保修期为自购买之日起,自购买之日起,自购买之日起。

售后政策

7天无理由退货
365天保修

有关保修条款的详情,从售后日开始,您可通过本服务热线
或拨打400-8609-663,或前往美的售后服务中心。
注: 本产品保修期为自购买之日起,自购买之日起,自购买之日起。
注: 本产品保修期为自购买之日起,自购买之日起,自购买之日起。
注: 本产品保修期为自购买之日起,自购买之日起,自购买之日起。

产品保修卡

用户信息
姓名: _____ 电话: _____
地址: _____ 邮编: _____
产品信息
产品名称: _____
产品型号: _____
销售商信息
名称: _____
地址: _____
电话: _____
日期: _____
购买渠道: _____

售后政策

7天无理由退货
365天保修

有关保修条款的详情,从售后日开始,您可通过本服务热线
或拨打400-8609-663,或前往美的售后服务中心。
注: 本产品保修期为自购买之日起,自购买之日起,自购买之日起。
注: 本产品保修期为自购买之日起,自购买之日起,自购买之日起。
注: 本产品保修期为自购买之日起,自购买之日起,自购买之日起。

